

L'AEROSOL DEL FUTURO È SMART

Prontex presenta
un nuovo rivoluzionario
concetto di aerosol
collegabile a tutti i tipi
di dispositivi digitali.



Link

SMART
TECHNOLOGY



Adatto a tutti



Ideale per bambini



Libertà di utilizzo
in qualsiasi ambito

L'EVOLUZIONE

dell'aerosolterapia

In un mondo che si trasforma rapidamente, dove il tempo è la risorsa che sempre scarseggia anche fermarsi per prendersi cura della propria salute può diventare difficile...

Per questo Prontex sempre attenta alle esigenze dei clienti e al passo con l'evolversi del mercato propone **un nuovo approccio alla terapia con aerosol.**

focus

L'aerosolterapia non è un trattamento adatto solo ai bambini, ma garantisce vantaggi importanti a tutte le età.

Ecco perchè è importante far si che tutti possano comodamente e in qualsiasi momento utilizzare questo tipo di trattamento.

utilizzo smart

Può essere utilizzato in **ogni momento e luogo**
Il nebulizzatore funziona con un **ampio angolo di inclinazione** pari a $\pm 65^\circ$ rispetto alla verticale (130° totali)

massima silenziosità

$\leq 35\text{dB}$.



Link rappresenta il futuro e introduce un nuovo concetto di aerosolterapia. Piccolo, Pratico e Smart grazie alla possibilità di essere alimentato con qualsiasi dispositivo USB (smartphone, tablet, power bank...) permette di svolgere diverse attività durante il trattamento.

Link: una libertà ad alta qualità terapeutica.



chattando
con gli amici



guardando
un video



in viaggio
in macchina



in ufficio



durante il gioco

Grazie a **Link** si è finalmente liberi di continuare a **lavorare, studiare, giocare, e muoversi** durante il trattamento.



TECNOLOGIA MESH

di ultima generazione

COS'È E COME FUNZIONA

Questa tecnologia permette di nebulizzare la soluzione medicinale in piccolissime particelle per una terapia ottimale sia nelle alte che nelle basse vie respiratorie.


La nebulizzazione avviene per effetto della vibrazione ad altissima frequenza (110.000 vibrazioni al secondo) di una prima membrana che spinge la soluzione contro una seconda sottile membrana contenente circa 1600 fori trapezoidali in un'area circolare con un diametro di 3 micron realizzati mediante microlavorazione laser robotizzata. Questa compressione genera un particolato fine con un valore medio studiato per assicurare un ottimo deposito polmonare.

La tecnologia Mesh non sviluppa calore e quindi non c'è alterazione del farmaco, controindicazione rilevata nella tecnologia ad ultrasuoni.



**Tecnologia
Mesh
testata
e affidabile**

Ogni componente critico è sottoposto a severi controlli. Tutte le camere mesh di nebulizzazione devono superare i test di dimensionamento delle particelle

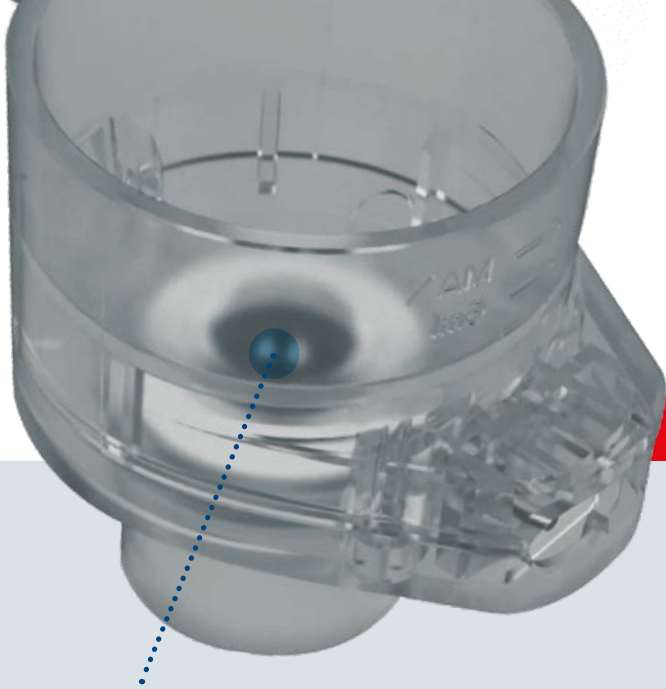

L'innovativo e unico design a "V" della camera Mesh portafarmaco

L'EVOLUZIONE

Il farmaco si raccoglie sempre verso il centro della camera, così da alimentare in continuo la Mesh e ridurre il volume residuo sino a $\leq 0.1\text{ml}$ garantendo così la **massima efficacia terapeutica** della singola somministrazione.

Il farmaco viene quindi somministrato praticamente al 100%



Elevato standard di controllo delle particelle

Membrana realizzata con acciaio inossidabile di fabbricazione giapponese progettato appositamente per la tecnologia mesh, garanzia di qualità e costanza dimensionale



Processo di fabbricazione a controllo continuo. Le prestazioni chiave sono costantemente monitorate.



MMAD
(diametro particellare con tecnologia laser refraction)



Velocità
di nebulizzazione



Percentuale della frazione respirabile < 5 μm
(con tecnologia laser refraction)



Corrente
di stand by e operativa

Certificazione Prodotto e Garanzia degli standard di Nebulizzazione

Ispezione completa delle particelle/tasso di particelle per garantire che ogni dispositivo soddisfi le prestazioni di livello medico, certificate da standard internazionali e dell'UE, garanzia di qualità.

PERCHÈ Link è il nuovo concetto di aerosol

Praticità e comfort di utilizzo



Tecnologia innovativa



Nuovo aerosol ad alta efficacia terapeutica

FUNZIONA GRAZIE ALLA BATTERIA DI UN QUALSIASI DISPOSITIVO

Smartphone, tablet, pc, power bank l'apparecchio è utilizzabile collegandolo al device con un semplice cavo USB in dotazione.

In pochi secondi pronti per il trattamento!

UNA SOLUZIONE INDOSSABILE, COMPATTA E LEGGERA

Un dispositivo pratico, facile da utilizzare e da pulire, che consente il massimo comfort durante il trattamento.

EFFICACE E CERTIFICATO

Un prodotto in grado di ottenere una terapia efficace con le stesse performance dell'aerosolterapia tradizionale. **Una tecnologia SMART con una elevata qualità del trattamento**

come funziona In soli 20 secondi pronti per la terapia

01

Versa il farmaco o la soluzione fisiologica nella camera Mesh e collegala al connettore



02

Scegli una delle due mascherine (adulto/bambino) in dotazione e collegala alla camera Mesh





In poco spazio
una dotazione
completa
per l'aerosolterapia

doppia mascherina
adulto/bambino



Boccaglio



camera Mesh
di ultima generazione
sostituibile a parte



Cavo USB
per collegamento



doppio
adattatore
(Android e IOS)



**Puoi utilizzare Link
con qualsiasi tipo di device:**

- Tablet
- Smartphone
- Pc fissi e portatili
- Power bank ecc...

03

Collega il connettore
USB all'attacco adatto
al tuo device:
-Android
-IOS



04

Collega Link
al dispositivo
e inizia il
trattamento



link

SMART
TECHNOLOGY

La nuova generazione degli Aerosol Mesh



focus



Ideale per bambini

Piccolo e silenzioso, permette di giocare, guardare e utilizzare il device di alimentazione durante la nebulizzazione.



Pratico e portatile

Un dispositivo piccolo, pratico e senza vincoli di spostamento. Consente di effettuare la terapia in ogni luogo in libertà.




Compatibile con ogni device

Dotato di doppio attacco è compatibile con la tecnologia Android e IOS.



Ridotto volume residuo del farmaco

Innovativa forma a V della camera. Il farmaco si raccoglie sempre verso il centro alimentando in continuo la Mesh. **Volume residuo sino a ≤ 0.1 ml.**

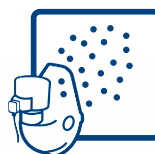

Tecnologia Mesh di ultima generazione

Grandezza particelle: MMAD 1,51 μ m
Dimensione media tale da poter penetrare più in profondità nell'area interessata.
Neb Rate: 0.30ml/min



≤ 35 dB.

MASSIMA SILENZIOSITÀ

Garantisce il massimo comfort durante l'uso. Consente di lavorare, vedere video o qualsiasi programma TV.





CURA DEL PRODOTTO (PRODUCT CARE)

Per un dispositivo sempre efficiente e pronto all'uso

È importante pulire la camera Mesh dopo ogni singolo trattamento.

NULLA DI PIÙ SEMPLICE!

Mettere 2o 3 gocce di normale acqua del rubinetto nella camera e attivare il dispositivo fino esaurimento della nebulizzazione.

Dopo una serie di trattamenti la camera Mesh può essere sostituita e acquistata come accessorio ricambio.

focus

Caratteristiche tecniche

ALIMENTAZIONE	PORTA USB INPUT 5V 1A
Aerosol output (EN 13544-1)	1,58 ml
Aerosol output rate (EN 13544-1)	0,22 ml/min
Dimensione particelle (mmad)	1,51µm
Volume nebulizzato medio	0,30 ml/min (2 ml NaCl 0,9%)
Livello sonoro	≤35dB
Volume di riempimento minimo	0,5 ml
Volume di riempimento massimo	8 ml
Angolo di inclinazione efficace	+/-65° rispetto alla verticale
Volume residuo	≤0.1ml
Peso	18 gr (senza accessori)
Dimensioni	59 (L) x 46 (H) x 34 (P) mm

01460



8 052675 160390

**Disponibile
Camera Mesh**

01465



8 052675 160406



L'AEROSOL SMART & GREEN

Viviamo in un mondo che non si ferma al presente, ma viaggia verso il futuro fatto di innovazione e sostenibilità, per un'evoluzione sociale, ambientale e digitale.

Rispetto per l'ambiente, per i **processi produttivi**, per il **riutilizzo** e il **riciclo** sono diventati quindi parte integrante nella scelta di un prodotto tecnologico senza rinunciare ovviamente alle performance e alla qualità.

Link: Smart & Green

L'aerosol Prontex non utilizza alcun tipo di energia a parte quella del dispositivo al quale viene collegato. Ha inoltre un minor impatto ecologico anche nello smaltimento non avendo batterie incluse.



- PLASTICA

- COSTI DI SMALTIMENTO

- CONSUMO ENERGETICO

Un approccio
Smart e Green in
grado di ottenerla
stessa efficacia
terapeutica in una
**nuova generazione
di Aerosol a
tecnologia Mesh**



Materiale P.O.P.

FOCUS SUI PLUS DEL NUOVO PRODOTTO LINK.

Un approfondimento visivo fondamentale per facilitare le vendite.



CARTELLO PROMO DA BANCO

Formato 31,5x22 cm

COD. 95460

CARTELLO VETRINA

Formato 70x100 cm

COD. 95465

PRONTEX[®]

SOLUZIONI MEDICALI



www.prontex.it